

## VI. Set-Up

## CHOOSE THE APPROPRIATE POWER SOURCE

The DURA-NEB 3000 can be used with the following power sources:

- Rechargeable Internal Battery (optional)
- Multi-Voltage AC Charger/Adapter For Worldwide Use
- 12V DC Cigarette Lighter or Vehicle Outlet

**A TO USE THE DURA-NEB 3000 FROM THE WALL OUTLET (115V OR 230V)**

1. Connect the plug of the AC Charger/Adapter into the wall outlet **A-1**.
2. Plug the small round end of the AC Charger/Adapter into the socket on the front panel of the DURA-NEB 3000 marked "Power Input" **A-2**.
3. Read and follow the Instructions For Use included with your PARI nebulizer package.


Note: The Multi-voltage Charger/Adapter comes equipped with an American Pattern Plug. You may need an Adapter Plug Set **A-3**, (sample plug shown) for most European Countries (Part No. 44F2207). The Charger/Adapter automatically converts the incoming voltage of the country visited. Manual switching is not required.

**B TO USE THE DURA-NEB 3000 FROM A 12V DC CIGARETTE LIGHTER OR VEHICLE OUTLET**

1. Plug the cigarette lighter end of the DC Charger/Adapter into the 12V DC cigarette lighter or vehicle outlet in the car, boat or motorhome **B-1**.
2. Plug the small round end of the DC Charger/Adapter into the socket on the front panel of the DURA-NEB 3000 marked "Power Input" **B-2**.
3. Read and follow the Instructions For Use included with your PARI nebulizer package.

**C TO USE THE DURA-NEB 3000 FROM THE INTERNAL BATTERY**

1. You must fully charge the internal battery before using for the first time. To charge the internal battery, follow the steps in Section VII.
2. As you take your treatment, please pay attention to the Battery Capacity Light so that the battery maintains a sufficient charge. The Battery Capacity Light will be green when the battery is fully charged and it will turn to yellow as the battery is depleted. When the Battery Capacity Light is red, the battery will need to be recharged (see Section VII). The battery will last longer if you recharge the unit as often as possible. Operating compressor when capacity light is red may damage battery. AVOID DRAINING THE BATTERY COMPLETELY, AS THIS WILL LOWER THE LIFE EXPECTANCY OF THE BATTERY.
3. Read and follow the Instructions For Use included with your PARI nebulizer package.

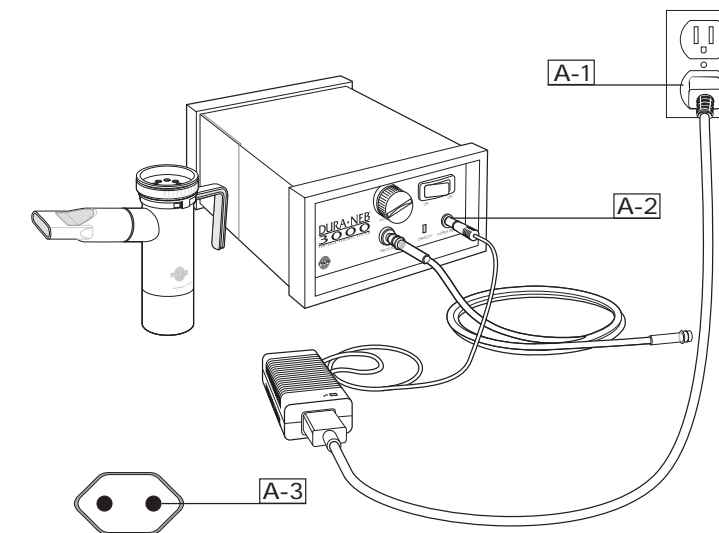

## FRANÇAIS

## VI. Préparation

## CHOISISSEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION VOULUE

On peut brancher le DURA-NEB 3000 aux sources d'alimentation suivantes :

- Pile interne rechargeable (facultatif)
- Adaptateur-chargeur multivoltagés c.a. pour utilisation partout dans le monde
- Adaptateur c.c. de 12 V pour allume-cigarettes ou prise de véhicule

**A USAGE DU DURA-NEB 3000 ALIMENTÉ À PARTIR D'UNE PRISE MURALE (115 V OU 230 V)**

1. Branchez la fiche du chargeur-adaptateur c.a. dans une prise murale **A-1**.
2. Branchez la petite extrémité ronde du chargeur-adaptateur c.a. dans la prise marquée "Power Input" située sur le panneau avant du DURA-NEB 3000 **A-2**.

3. Lisez et suivez les instructions du guide d'utilisation fourni dans la boîte du nébuliseur PARI.

Remarque : Le chargeur-adaptateur multivoltagés est doté d'une fiche adaptée aux normes nord-américaines. Pour la plupart des pays européens, vous devrez vous munir d'une fiche d'adaptation **A-3** (pièce n° 44F2207). Le chargeur-adaptateur convertit automatiquement la tension électrique du pays visité pour les besoins de l'appareil. Aucune commutation manuelle n'est requise.


**B USAGE DU DURA-NEB 3000 ALIMENTÉ À PARTIR DE L'ALLUME-CIGARETTES OU DE LA PRISE C.C. DE 12V D'UN VÉHICULE**

1. Introduisez l'extrémité prévue à cette fin du cordon du chargeur-adaptateur c.c. dans le logement de l'allume-cigarettes ou de la prise c.c. de 12 V d'une voiture, d'un bateau ou d'une autocaravane **B-1**.
2. Branchez la petite extrémité ronde du chargeur-adaptateur c.c. dans la prise "Power Input" située sur le panneau avant du DURA-NEB 3000 **B-2**.
3. Lisez et suivez les instructions du guide d'utilisation fourni dans la boîte du nébuliseur PARI.

**C USAGE DU DURA-NEB 3000 ALIMENTÉ À PARTIR DE LA PILE INTERNE**

1. Avant la première utilisation de l'appareil, vous devez charger complètement la pile interne. Pour charger cette dernière, suivez la méthode décrite à la section VII.
2. Lors de chaque traitement, surveillez périodiquement l'indicateur lumineux de capacité de la pile pour veiller à ce que celle-ci ait une charge suffisante pour permettre le fonctionnement continu de l'appareil tout au long du traitement. L'indicateur lumineux est vert lorsque la pile est complètement chargée. L'indicateur passera au jaune une fois que sa charge s'épuise et au rouge lorsqu'il devient nécessaire de le recharger (voir la section VII). La pile durera plus longtemps si vous rechargez l'unité aussi souvent que possible. Le fonctionnement de l'appareil alors que l'indicateur lumineux de capacité est rouge risque d'endommager la pile. ÉVITEZ D'ÉPUISER COMPLÈTEMENT LA CHARGE DE LA PILE CAR CELA A POUR EFFET D'EN ÉCOURTER LA DURÉE DE VIE.
3. Lisez et suivez les instructions du guide d'utilisation fourni dans la boîte du nébuliseur PARI.

## B

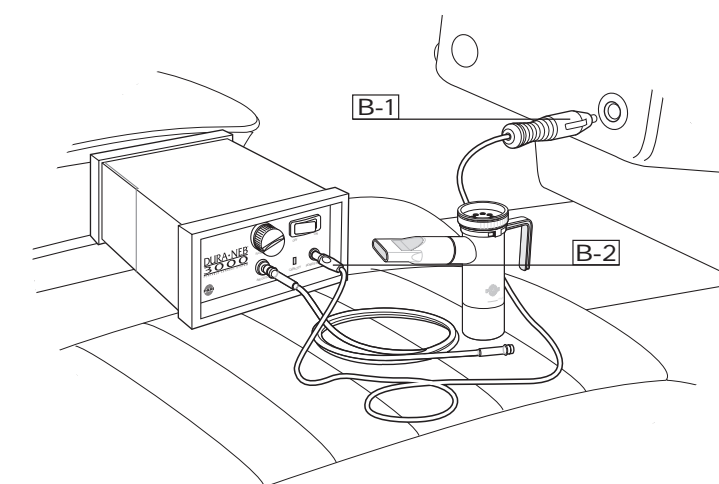

## ESPAÑOL

## VI. Montaje

## ESCOJA LA FUENTE DE PODER APROPIADA.

El Compresor DURA-NEB 3000 puede usarse con las siguientes fuentes de poder:

- Batería Interna Recargable (opcional)
- Cargador/Adaptador CA (115V o 230V), Para Uso Mundial
- Cargador/Adaptador CD (12V), para Carro o Conexión de Vehículo

**A USANDO EL DURA-NEB 3000 CON EL TOMACORRIENTE DE LA PARED (115V O 230V)**

1. Conecte el enchufe del Cargador/Adaptador CA en el tomacorriente de la pared **A-1**.
2. Conecte el extremo redondo y pequeño del Cargador/Adaptador CA en el enchufe del tablero de control del DURA-NEB 3000, marcado "Power Input" **A-2**.

3. Lea y siga las IPEU incluidas con su nebulizador PARI.

Nota: El Cargador/Adaptador CA, para uso mundial, viene equipado con un enchufe Norteamericano. Para la mayoría de los países Europeos, Ud. necesitara el Juego de Adaptador de Enchufes **A-3** (Parte No. 44F2207). El Cargador/Adaptador CA automáticamente convierte el voltaje del país visitado. No se requiere cambiar el voltaje manualmente.

**B USANDO EL DURA-NEB 3000 CON EL ENCENDEDOR DEL AUTOMOVIL**

1. Conecte la conexión del Cargador/Adaptador CD en el enchufe del encendedor del carro o tomacorriente de automóvil, barco o vehículo de recreación **B-1**.
2. Conecte el extremo redondo y pequeño del Cargador/Adaptador CD en el enchufe del tablero de control del DURA-NEB 3000, marcado "Power Input" **B-2**.
3. Lea y siga las IPEU incluidas con su nebulizador PARI.

**C USANDO EL DURA-NEB 3000 CON LA BATERÍA INTERNA**

1. Ud. debe cargar la batería interna totalmente antes de usar por primera vez. Para cargar la batería interna, siga los pasos en la Sección VII.
2. Cuando Ud. administre su tratamiento, por favor mantenga atención en el Indicador De Capacidad De La Batería, para que la batería mantenga suficiente carga. El Indicador De Capacidad De La Batería enciende verde cuando la batería esta cargada totalmente y enciende amarillo cuando se va descargando. Cuando el Indicador De Capacidad De La Batería encienda rojo, la batería necesitará ser recargada (vea Sección VII). La batería durará mucho más tiempo si Ud. la recarga lo más posible. Si Ud. opera la unidad cuando el Indicador De Capacidad De La Batería encienda rojo, puede dañar la batería. EVITE DESCARGAR LA BATERÍA COMPLETAMENTE, ESTO REDUCIRÁ LA VIDA EXPECTATIVA DE LA BATERÍA.
3. Lea y siga las IPEU incluidas con su nebulizador PARI.

## C

